

Votre praticien vous a demandé d'effectuer ce test car l'analyse des éléments présents dans les selles fournit des informations indirectes sur la présence potentielle de métaux toxiques dans l'organisme. Pour de nombreux métaux toxiques, l'excrétion fécale est la principale voie d'élimination naturelle. L'analyse élémentaire des selles fournit également une indication directe de l'exposition alimentaire aux métaux toxiques. Mosaic Diagnostics est là pour vous accompagner dans cette démarche.

Contenu de la trousse d'épreuve

Commencez par identifier ces éléments de votre trousse d'épreuve.

S'il manque des composants ou s'ils sont périmés, communiquez avec le Service à la clientèle de Mosaic en composant le 800 288-0383.



Boîte de
la trousse
d'épreuve



Gants jetables



1 plateau de
prélèvement



Sac transparent
à fermeture
par pression
et glissière
pour produits
biologiques
dangereux



Emballage
d'expédition du
laboratoire



Cuillère jetable



Feuille
d'emballage
absorbante



Flacon d'échantillon (contenant
de l'eau) Vérifiez la date de
péremption du sachet du flacon

Pour obtenir des instructions en
ligne, utilisez le code QR ou accédez
au site mosaicdx.com/instructions



Avant de commencer :

Il n'existe aucune restriction alimentaire particulière. Ne prélevez pas votre échantillon dans les 3 jours suivant un examen gastro-intestinal au moyen d'agents de contraste au baryum ou après l'installation ou le retrait d'amalgames dentaires (remplissages en argent). Si vous avez des amalgames dentaires, veuillez l'indiquer sur l'autocollant qui se trouve sur votre sac transparent à fermeture par pression et glissière pour produits biologiques dangereux.

Commençons

1

Inscrivez le nom du patient, sa date de naissance et la date de prélèvement sur l'autocollant à code-barres ET sur le flacon. Collez l'autocollant à code-barres sur le flacon, en vous assurant que les renseignements inscrits sont visibles. Utilisez un stylo à bille à encre bleue ou noire; n'utilisez pas de crayon-feutre ou de marqueurs effaçables à sec. **Remarque : Les échantillons non étiquetés seront rejetés.**

2

Enfilez un gant et prélevez l'échantillon de selles dans le plateau de prélèvement. Ne laissez pas l'urine ou l'eau toucher l'échantillon.

3

À l'aide de la cuillère jetable, prélevez plusieurs échantillons dans différentes zones de l'échantillon et ajoutez-les dans le flacon. Assurez-vous que les échantillons atteignent la ligne de remplissage. Fermez complètement le bouchon et secouez vigoureusement pendant environ 30 secondes. Placez au réfrigérateur jusqu'à l'expédition.

1




+

2



+

3

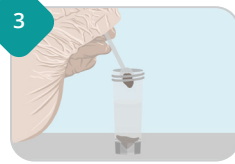

Préparation de l'emballage

1

Assurez-vous que le flacon est étiqueté et hermétiquement fermé. Placez le flacon d'échantillon dans le sac transparent à fermeture par pression et glissière pour produits biologiques dangereux. Ajoutez la feuille d'emballage absorbante et scellez à l'aide de la fermeture à glissière.



2

Placez le sac pour produits biologiques dangereux à fermeture par pression et glissière dans la boîte de la trousse d'épreuve.



3

Placez la boîte de la trousse d'épreuve dans l'emballage d'expédition du laboratoire.



Lisez la notice d'instructions relatives à l'expédition pour plus de détails sur l'expédition.

Avez-vous des questions?

Si vous avez des questions concernant un aspect quelconque du prélèvement d'échantillon ou du processus d'expédition, n'hésitez pas à communiquer avec nous :



Téléphone Notre sympathique équipe du Service à la clientèle est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, HNC au 800 288-0383



Courriel CustomerService@MosaicDX.com

Les échantillons doivent être expédiés le lundi, le mardi ou le mercredi (à l'extérieur des États-Unis, le lundi ou le mardi). En cas de prélèvement la fin de semaine, conservez l'échantillon jusqu'au lundi pour l'expédier.

Les résultats de vos tests seront envoyés à votre professionnel de la santé dans les deux à trois semaines suivant la réception du ou des échantillons par Mosaic Diagnostics. Il incombera à votre professionnel de la santé de les examiner avec vous, d'identifier tout domaine d'intérêt ou de préoccupation et de travailler avec vous pour définir les prochaines étapes appropriées. Le personnel de Mosaic Diagnostics ne peut pas discuter des résultats de test directement avec les patients ou les membres de leur famille.