MOSAIC DIAGNOSTICS

MDX_INST_HAIR 9-2026 v5

Instructions relatives au prélèvement : Métaux et éléments – Toxiques et essentiels (cheveux)

Votre praticien vous a demandé d'effectuer ce test car vos cheveux constituent un témoin vivant de votre exposition aux métaux lourds. Ils poussent d'environ 1,2 à 2,5 cm par mois, et au fur et à mesure de leur croissance, ils accumulent des contaminants tels que les métaux lourds. Un échantillon de cheveux permet donc d'enregistrer cette exposition.

Contenu de la trousse d'épreuve

Commencez par identifier ces éléments de votre trousse d'épreuve.

S'il manque des composants ou s'ils sont périmés, communiquez avec le Service à la clientèle de Mosaic en composant le 800 288-0383.




Boîte ou enveloppe de la trousse d'épreuve



Sac transparent à fermeture par pression et glissière



Pèse-cheveux en carton

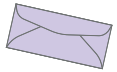

Enveloppe d'expédition pour retour

Avant de commencer

Rincez soigneusement vos cheveux et séchez-les complètement avant de prélever votre échantillon.

Si vous avez récemment traité vos cheveux, ne réalisez pas le test.

Les cheveux ayant subi une permanente, une coloration, une décoloration ou tout autre traitement chimique sont vulnérables à la contamination et ne doivent pas être utilisés. Pour obtenir les meilleurs résultats, attendez au moins un mois après l'une de ces interventions afin de laisser repousser de nouveaux cheveux.

Avez-vous des questions?
Si vous avez des questions concernant un aspect quelconque du prélèvement d'échantillon ou du processus d'expédition, n'hésitez pas à communiquer avec nous :



Téléphone Notre sympathique équipe du Service à la clientèle est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, HNC au 800 288-0383




Courriel CustomerService@MosaicDX.com

Commençons



Complétez les informations sur l'étiquette à code-barres en indiquant le nom du patient, sa date de naissance ainsi que la date et l'heure du prélèvement. Utilisez un stylo à bille à encre bleue ou noire. N'utilisez pas de feutres ni de marqueurs effaçables à sec. **Si ces informations sont manquantes, votre échantillon sera rejeté.**

Apposez l'étiquette avec le code-barres sur le sachet transparent à fermeture à glissière. N'oubliez pas : votre échantillon ne pourra pas être analysé si les informations du patient ne figurent pas sur le sachet contenant l'échantillon.

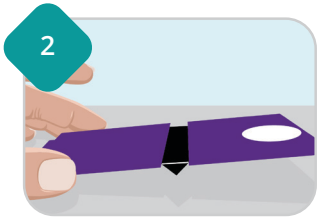

Installez la balance – Suivez les instructions imprimées sur la balance.



Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser une paire de ciseaux en acier inoxydable propres et tranchants Choisissez 5 à 6 petits endroits à l'arrière de votre tête que vous pouvez facilement atteindre avec vos ciseaux.



Coupez aussi près que possible du cuir chevelu pour vous assurer de prélever les cheveux les plus récents. Conservez seulement 2,5 cm (1 po) des cheveux les plus proches du cuir chevelu, jetez le reste. Placez les cheveux les plus proches de votre cuir chevelu sur le cercle blanc de la balance.



Continuez à ajouter des cheveux jusqu'à ce que la balance pointe vers le bas pour toucher la table. Placez les cheveux dans le sac transparent à fermeture par pression et glissière

Préparation de l'emballage

1. Scellez le sac transparent à fermeture par pression et glissière.
2. Assurez-vous que l'étiquette à code-barres sur le sac de la trousse est remplie.
3. Placez le sac à échantillons à fermeture par pression et glissière dans l'enveloppe d'expédition fournie.



Lisez la notice d'instructions relatives à l'expédition pour plus de détails sur l'expédition.

REMARQUE : Si vous expédiez cet échantillon avec d'autres échantillons de test Mosaic, emballez l'échantillon de cheveux dans l'enveloppe d'expédition violette, puis placez-le dans la boîte du kit. Ne placez pas l'enveloppe directement dans le sachet prévu pour le transport vers le laboratoire, fourni avec l'autre kit.

Les résultats de vos tests seront envoyés à votre professionnel de santé dans un délai de 2 à 3 semaines après la réception du ou des échantillons par Mosaic Diagnostics. Il incombera à votre professionnel de la santé de les examiner avec vous, d'identifier tout domaine d'intérêt ou de préoccupation et de travailler avec vous pour définir les prochaines étapes appropriées. Le personnel de Mosaic Diagnostics ne peut pas discuter des résultats de test directement avec les patients ou les membres de leur famille.